



FSN

Οθόνη 4K UHD

Οδηγίες Χρήσης

FM-A2701D

FM-A2701DS

FM-B2702D

FM-B2702DG

FM-E2701D

FM-E2701DG

FM-E2701DT

FM-E2701DGT

FM-F2701D

FM-F2701DG

FM-F3101D

FM-F3101DG

FS-P3102D

FS-P3102DS

FS-P3102DG

FM-E3203D

FM-E3203DG



Πριν τη σύνδεση, τη λειτουργία ή τη ρύθμιση αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά και πλήρως αυτό το φυλλάδιο οδηγιών.

Αγγλικά

Οι προδιαγραφές και οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



Οι οδηγίες χρήσης για αυτό το προϊόν διατίθενται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή (eIFU). Επιλέξτε από διάφορες γλώσσες. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Adobe Acrobat για να προβέλλετε τα αρχεία eIFU. Αποκτήστε πρόσβαση στα eIFUs στη σελίδα fsnmed.com/support/eifu/

Περιγραφή Προϊόντος / Προβλεπόμενη Χρήση



Αυτό το προϊόν που κατασκευάζεται από την FSN Medical Technologies είναι μια υψηλής ποιότητας χειρουργική οθόνης που σχεδιάστηκε για προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές OR. Αυτή η ιατρική οθόνη είναι μοναδικά εξοπλισμένη ώστε να διαχειρίζεται εργασίες στο απαιτητικό περιβάλλον χειρουργείου. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης περιλαμβάνουν:

- Ανίχνευση ταχέων σημάτων, πίνακες ισχυρής λειτουργίας
- Χωρίς φαινόμενα αβλεψίας
- Χωρίς Ανεμιστήρες - συμβατό για αποστειρωμένο περιβάλλον
- Βαθμονόμηση σε κλινικό χρώμα
- Μεγέθυνση, παύση, εικόνα σε εικόνα

Προβλεπόμενος σκοπός

Αυτή η συσκευή προορίζεται να συνδεθεί με άλλο ιατρικό εξοπλισμό και να εμφανίσει εικόνες ή βίντεο από ενδοσκοπικές κάμερες, κάμερες δωματίου και πληροφορίες ασθενούς όπως υπερηχογράφημα, καρδιολογία και αναισθησιολογία. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για διάγνωση. Αυτή η συσκευή λογίζεται ως συμβατή με άλλου τύπου εξειδικευμένους χειρουργικούς και διαγνωστικούς εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται σε χειρουργικό περιβάλλον, χειρουργεία, αίθουσες έκτακτης ανάγκης και χειρουργικές εγκαταστάσεις.

Περιβάλλον προοριζόμενης χρήσης

Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από έναν εκπαιδευμένο ιατρό σε ένα χώρο υγειονομικής περίθαλψης όπου η επαφή με έναν ασθενή είναι απίθανη (δεν εφαρμόζεται μέρος).

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να πληροί τις απαιτήσεις ιατρικής ασφάλειας για μια συσκευή που βρίσκεται κοντά σε ασθενή.

Προειδοποίηση: Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με εξοπλισμό υποστήριξης ζωής.

Οδηγίες Χρήσης

Αυτή η συσκευή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από έναν εκπαιδευμένο ιατρό για την εμφάνιση εικόνων από διαδικασίες, όπως ενδοσκόπηση, υπερηχογράφημα, καρδιολογία και αναισθησιολογία. Αυτή η συσκευή συνδέεται με ιατρικό εξοπλισμό απεικόνισης για την εμφάνιση εικόνων, βίντεο ή πληροφοριών ασθενούς κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για διάγνωση.

Ορισμοί συμβόλων

Τα παρακάτω σύμβολα εμφανίζονται στο προϊόν, στην σήμανση του ή στη συσκευασία του. Κάθε σύμβολο φέρει έναν ειδικό ορισμό, όπως ορίζεται παρακάτω:

	Επικίνδυνο: Υψηλή τάση		Τροφοδοτικό		Συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα
	Διατίθεται από αδειοδοτημένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης		Υποδεικνύει ισοδυναμική γείωση		Unique Device Identifier
	Υποδεικνύει προστατευτική γείωση		Υποδεικνύει από πάνω προς τα κάτω κατεύθυνση		Πιστοποίηση Κορέας
	Διακόπτης ελέγχου ισχύος DC		Εύθραστο		Εγκρίθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς CCC
	Να μην βρέχεται		Μέγιστη Στοιβαξη		Ετικέτες RoHS Κίνας.
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες λειτουργίας.		Υποδεικνύει τον κατασκευαστή		Αριθμός Καταλόγου
	Υποδεικνύει την ημερομηνία κατασκευής		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα		Ιατρική συσκευή
	Σειριακός αριθμός		Περιορισμός υγρασίας		Συμβουλευτείτε τις οδηγίες λειτουργίας - ηλεκτρονικές
	Περιορισμός θερμοκρασίας		Περιορισμός της ατμοσφαιρικής πίεσης		Οντότητα εισαγωγέα
	Αξιολογήθηκε η συμμόρφωση του Ηνωμένου Βασιλείου		Ενεργοποίηση		Απενεργοποίηση
	Υπεύθυνο πρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου		Ευρασιατική Συμμόρφωση		Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
	Δοκιμασμένο να συμμορφώνεται με το πρότυπο FCC Class B (ΗΠΑ).		Εθελοντικό Συμβούλιο Ελέγχου Παρεμβάσεων - Ιαπωνία		īeejas aizsardzības vērtējums
	Υποδεικνύει την απόδειξη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Ιατρικών Συσκευών ΕΕ 2017/745 και τα ισχύοντα πρότυπα.				
	Ο ιατρικός εξοπλισμός είναι σύμφωνος με το ANSI / AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) και CAN / CSA - C22.2 No. 60601-1 (2014) σχετικά με ηλεκτροπληξία, κινδύνους πυρκαγιάς και μηχανικό κίνδυνο.				
	Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Οδηγία ΑΗΗΕ 2012/19 / ΕΕ). Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται ως αστικά απόβλητα χωρίς διαλογή και πρέπει να συλλέγονται χωριστά. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή άλλη εξουσιοδοτημένη εταιρεία διάθεσης για τον παροπλισμό του εξοπλισμού σας.				

Σημείωση: Ένα τυπωμένο αντίγραφο του εγχειριδίου στα αγγλικά παρέχεται μαζί με το προϊόν. Οι χρήστες εντός των κρατών μελών της ΕΕ, επικοινωνούν με τον τοπικό διανομέα για άλλες γλώσσες. Αυτό ισχύει για τα κράτη μέλη της ΕΕ όπου το προϊόν έχει αγοραστεί μέσω εξουσιοδοτημένων καναλιών.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Πληροφορίες προσοχής



Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τον χρήστη ότι έχει συμπεριληφθεί σημαντική βιβλιογραφία σχετικά με τη λειτουργία αυτής της μονάδας. Επομένως, πρέπει να την διαβάσετε προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα.



Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τους χρήστες ότι η μη μονωμένη τάση μέσα στη μονάδα μπορεί να έχει επαρκές μέγεθος ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Επομένως, είναι επικίνδυνο να έρθετε σε επαφή με οποιοδήποτε εξάρτημα στο εσωτερικό της μονάδας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ΜΗΝ αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το οπίσθιο μέρος). Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη στο εσωτερικό. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε το πολωμένο βύσμα της συσκευής με υποδοχή καλωδίου επέκτασης ή άλλες εξόδους, εκτός εάν οι οδόντες μπορούν να εισαχθούν πλήρως.



Underwriters Laboratories (UL) Ταξινόμηση:

Συμμόρφωση ασφάλειας UL:

Αυτή η ιατρική οθόνη διαθέτει ταξινόμηση UL ΚΑΙ ΘΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 NO. 601,1.



Συμμόρφωση ΕΕ και συμμόρφωση με EMC:

Αυτή η μονάδα ιατρικής παρακολούθησης πληροί τις απαιτήσεις των EN60601-1 και EN60601-1-2, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Ιατρικών Συσκευών της ΕΕ (MDR 2017/745). Εξάρτημα ιατρικών συσκευών κατηγορίας Ι CE.

Αυτή η ιατρική οθόνη πληροί τα παραπάνω πρότυπα μόνο όταν χρησιμοποιείται με το παρεχόμενο τροφοδοτικό ιατρικής βαθμονόμησης. Χρησιμοποιήστε βύσμα τύπου 120V με τάση 5-15P μόνο στις ΗΠΑ

ATM160T-P240

Προφύλαξη: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι του σωστού τύπου κατά τις απαιτήσεις της γεωγραφικής σας περιοχής. Αυτή η ιατρική οθόνη διαθέτει τροφοδοτικό γενικής χρήσης που επιτρέπει την λειτουργία σε περιοχές τάσης 100-120V AC ή 200-240V εναλλασσόμενου ρεύματος (δεν απαιτείται ρύθμιση από το χρήστη).

Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας με σωστό τύπο βύσματος σύνδεσης. Εάν η πηγή τροφοδοσίας είναι 120 V AC, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο τροφοδοσίας, το οποίο είναι Καλώδιο Τροφοδοσίας Βαθμονόμησης Νοσοκομείου με βύσμα τύπου NEMA 5-15, που φέρει ετικέτα για 125 volts AC με εγκρίσεις UL και C-UL. Εάν η πηγή τροφοδοσίας είναι τροφοδοσία 240 V εναλλασσόμενου ρεύματος, χρησιμοποιήστε το βύσμα σύνδεσης τύπου (T blade) με καλώδιο τροφοδοσίας γείωσης που πληροί τους κανονισμούς ασφαλείας της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής χώρας.

Μια θέση γείωσης, στο πίσω μέρος της οθόνης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γείωση του πλαισίου της οθόνης. Κάθε τέτοια γείωση θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες ηλεκτρικούς κώδικες. Η θέση της γείωσης εμφανίζεται στο μηχανικό σχέδιο που βρίσκεται στις οδηγίες χρήσης.



Ανακύκλωση (Οδηγία ΑΗΗΕ 2012/19 / ΕΕ)

Ακολουθήστε τις τοπικές κυβερνητικές διατάξεις και τα σχέδια ανακύκλωσης σχετικά με την ανακύκλωση ή τη διάθεση αυτού του εξοπλισμού.

Προειδοποίηση: Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αυτού του εξοπλισμού που βρίσκεται δίπλα ή στοιβάζεται με άλλο εξοπλισμό, διότι μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλη λειτουργία. Εάν απαιτείται τέτοια χρήση, αυτός ο εξοπλισμός και ο άλλος εξοπλισμός πρέπει να τηρούνται για να επαληθευτεί ότι λειτουργούν κανονικά.

Προειδοποίηση: Η χρήση αξεσουάρ, μορφοτροπέων και καλωδίων διαφορετικών από αυτά που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή αυτού του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή σε μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατρωσία αυτού του εξοπλισμού και να οδηγήσει σε ακατάλληλη λειτουργία.

Προειδοποίηση: Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνιών RF (συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών όπως καλώδια κεραίας και εξωτερικές κεραίες) θα πρέπει να χρησιμοποιείται όχι περισσότερο από 30 cm (12 ίντσες) σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της ιατρικής οθόνης LCD, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του εξοπλισμού.

Προειδοποίηση: Η χρήση αυτού του εξοπλισμού στο περιβάλλον ακτινογραφίας ή μαγνητικού συντονισμού μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του εξοπλισμού, παρεμβολές με άλλο εξοπλισμό ή παρεμβολή σε ραδιοφωνικές υπηρεσίες.

Προειδοποίηση: Η χρήση καλωδίων και/ή άλλων εξαρτημάτων με αυτήν τη συσκευή, εκτός από αυτά που καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες εκπομπές ή μειωμένη ατρωσία αυτής της συσκευής.

Προειδοποίηση: Αυτό το προϊόν δεν θεωρείται ως φυσική σύνδεση με ηλεκτροχειρουργικό εξοπλισμό HF (Υψηλή Συχνότητα).

Προειδοποίηση: Δεν είναι κατάλληλο για χρήση κατά την παρουσία εύφλεκτου μείγματος αναισθητικών με οξυγόνο ή με νιτρώδες οξείδιο.

Οδηγίες ασφαλείας

Σχετικά με την Ασφάλεια

1. Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στην έξοδο του προσαρμογέα DC, βεβαιωθείτε ότι ο χαρακτηρισμός τάσης του προσαρμογέα DC αντιστοιχεί στην τοπική ηλεκτρική παροχή.
2. Μην εισάγετε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα στα ανοίγματα της ιατρικής οθόνης LCD. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Μόνο ένας εξειδικευμένος τεχνικός θα πρέπει να ανοίξει το περίβλημα της ιατρικής οθόνης LCD.
4. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την ιατρική οθόνη εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να παραμένει ελεύθερο και μακριά από σημεία μετάβασης απόμων.
5. Κατά την αποσύνδεση τραβήξτε από την πρίζα το φις και όχι το καλώδιο τροφοδοσίας της ιατρικής οθόνης LCD.
6. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης ιατρικής οθόνης σας όταν αυτή παραμένει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
7. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ιατρικής οθόνης από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος πριν από οποιαδήποτε υπηρεσία.
8. Εάν η ιατρική οθόνη δεν λειτουργεί κανονικά, ιδίως εάν υπάρχουν ασυνήθιστοι ήχοι ή μυρωδιάς που προέρχονται από αυτή, αποσυνδέστε την αμέσως και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο εξυπηρέτησης.
9. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή εάν το σετ πρέπει να εγκατασταθεί σε μια μη προσβάσιμη περιοχή.

Προειδοποίηση: Μην αγγίζετε ταυτόχρονα τις υποδοχές εισόδου ή εξόδου και τον ασθενή.

Προειδοποίηση: Αυτή η ιατρική οθόνη προορίζεται για σύνδεση με σήματα εισόδου/εξόδου και άλλες συνδέσεις που συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο IEC (π.χ. IEC60950 για εξοπλισμό πληροφορικής και σειρά IEC60601 για ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό). Επιπλέον, όλα αυτά τα συνδυαζόμενα-συστήματα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 60601-1-1 ή την ρήτρα 16 των 3 Ed. του IEC 60601-1, αντίστοιχα, για απαιτήσεις ασφαλείας για ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα. Οποιοσδήποτε έχει διαμορφώσει ένα συνδυαζόμενο-σύστημα είναι υπεύθυνος για το σύστημα το οποίο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του IEC 60601-1-1 ή της ρήτρας 16 της 3ης έκδοσης. του IEC 60601-1, αντίστοιχα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο τεχνικό ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να συνδέεται μόνο σε δίκτυο παροχής με προστατευτική γείωση. Η τροφοδοσία ρεύματος (προσαρμογέας AC/DC) καθορίζεται ως μέρος της έγχρωμης οθόνης LCD. Μην τοποθετείτε εξοπλισμό με τρόπο που καθιστά δύσκολη την αποσύνδεση του φις του καλωδίου ρεύματος από την είσοδο της συσκευής.

Προειδοποίηση: Μην τροποποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό χωρίς την άδεια του κατασκευαστή.

Η ασφάλεια του προϊόντος έχει χαμηλότερη ικανότητα διακοπής. Να μην εγκαθίσταται στο σύστημα ισχύος κτιρίου, με πιθανό ρεύμα βραχυκυκλώματος άνω των 35 Α.

Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας και αποθήκευσης

Εύρος θερμοκρασίας μεταξύ 0 °C και 40 °C (λειτουργία), -20 °C έως 60 °C (αποθήκευση)

Σχετική υγρασία που κυμαίνεται από 10% έως 85%

Το εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 500 έως 1060hPa.

Κατά την εγκατάσταση

1. Τα ανοίγματα στον ιατρικό πίνακα ελέγχου παρέχονται για εξαερισμό. Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, τα ανοίγματα αυτά δεν πρέπει να εμποδίζονται ή να καλύπτονται. Εάν τοποθετήσετε την ιατρική οθόνη σε βιβλιοθήκη ή σε κάποιο άλλο κλειστό χώρο, φροντίστε να της παρέχετε επαρκή εξαερισμό.
2. Μην εκθέτετε την ιατρική οθόνη σε βροχή και μην την χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό. Εάν η ιατρική οθόνη βραχεί κατά λάθος, αποσυνδέστε την και επικοινωνήστε αμέσως με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Μπορείτε να καθαρίσετε την ιατρική οθόνη με ένα υγρό πανί, εάν είναι απαραίτητο, αλλά πρώτα βεβαιωθείτε ότι την αποσυνδέσατε από την τροφοδοσία.
3. Τοποθετήστε την ιατρική οθόνη κοντά σε μια εύκολα προσιτή πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
4. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας είναι 40 °C. Μην χρησιμοποιείτε την ιατρική σας οθόνη σε άμεσο ηλιακό φως και μην την κρατάτε μακριά από θερμαντήρες, σόμπες, τζάκια και πηγές θερμότητας.
5. Μην τοποθετείτε την ιατρική οθόνη σε ασταθή βάση, η ιατρική οθόνη ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία ή να πέσει.
6. Αυτή η ιατρική οθόνη δεν πρέπει να αναπηδά όταν είναι κεκλιμένη σε γωνία 5°, σε οποιαδήποτε θέση, κατά τη διάρκεια της ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, εκτός από τη μεταφορά.
7. Στη θέση που έχει καθοριστεί για τη μεταφορά, η ιατρική οθόνη δεν πρέπει να παρουσιάζει υπεραντιστάθμιση όταν υπόκειται σε εγκάρσια δόνηση γωνίας 10 μοιρών.
8. Όταν μεταφέρετε αυτό το προϊόν, χρησιμοποιήστε και τις δύο λαβές (αν περιλαμβάνονται) στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του προϊόντος και μεταφέρετε το χρησιμοποιώντας δύο άτομα. Αν θέλετε το προϊόν να εγκατασταθεί σε άλλο μέρος, καλέστε το κέντρο σέρβις.
9. Να χρησιμοποιείτε πάντα μόνο τα γνήσια καλώδια και αξεσουάρ με τη συσκευή.
10. Μην τοποθετείτε αυτήν την οθόνη σε άλλο εξοπλισμό.

Επισκευή

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την ιατρική οθόνη LCD, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση καλύμματος μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνες τάσεις ή άλλους κινδύνους και θα ακυρώσει την εγγύηση. Ανατρέξτε σε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Αποσυνδέστε την ιατρική οθόνη από την πηγή τροφοδοσίας της και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο.
- Εάν έχει διαρρεύσει υγρό στην ιατρική οθόνη LCD.
- Εάν έχουν πέσει αντικείμενα στην ιατρική οθόνη LCD.
- Εάν η ιατρική οθόνη έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία.
- Αν η ιατρική οθόνη έχει υποστεί υπερβολικό τράνταγμα από την πτώση.
- Εάν το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.
- Εάν η ιατρική οθόνη φαίνεται να έχει υπερθερμανθεί.
- Εάν η ιατρική οθόνη εκπέμπει καπνό ή μη φυσιολογική οσμή.
- Εάν η ιατρική οθόνη δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Βιολογικοί κίνδυνοι

Για να αποφευχθεί η εξάπλωση λοιμώξεων, αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιβάλλοντα όπου η βιολογική απολύμανση μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιτυχία.

Επιστρεφόμενο προϊόν

Μετά την αντιμετώπιση προβλημάτων, εάν τα προβλήματα επιμένουν, απολυμάνετε την οθόνη και επιστρέψτε την στο FSN χρησιμοποιώντας την αρχική συσκευασία. Συμπεριλάβετε τα αξεσουάρ που συνοδεύουν την οθόνη κατά την αποστολή επιστροφής. Επισυνάψτε μια σύντομη επεξήγηση της δυσλειτουργίας.

Επικοινωνήστε με την FSN Medical Technologies για έναν αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής και οδηγίες, πριν από την επιστροφή της συσκευής.

Παρελκόμενα

Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή ή πωλούνται μαζί με την ιατρική οθόνη LCD.

Ταξινόμηση για συμμόρφωση με την ασφάλεια

- Προστασία από ηλεκτροπληξία: Κατηγορία Ι συμπεριλαμβανομένου του προσαρμογέα AC/DC Αυτός ο ιατρικός εξοπλισμός είναι σύμφωνος με το ANSI / AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) και CAN / CSA - C22.2 No. 60601-1 (2014) σχετικά με ηλεκτροπληξία, κινδύνους πυρκαγιάς και μηχανικό κίνδυνο.
- Εφαρμοσμένα Εξαρτήματα: Μη εφαρμοζόμενα Εξαρτήματα
- Βαθμός ασφάλειας κατά την παρουσία εύφλεκτου μείγματος αναισθητικών με αέρα ή με οξυγόνο ή με νιτρώδη οξείδιο. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση κατά την παρουσία εύφλεκτου μείγματος αναισθητικών με οξυγόνο ή με νιτρώδες οξείδιο.
- Για κρίσιμες εφαρμογές, συνιστάται να υπάρχει διαθέσιμη οθόνη αντικατάστασης.
- Τρόπος λειτουργίας: Συνεχής.

Ειδοποίηση προς τον χρήστη:

Τυχόν σοβαρό συμβάν που έχει συμβεί σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή / και ο ασθενής. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων της FSN Medical Technologies για πληροφορίες σχετικά με αλλαγές και νέα προϊόντα.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Αυτή η μονάδα ιατρικής παρακολούθησης έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις IEC 60601-1-2: 2014 / AMD1: 2020 για EMC με άλλες συσκευές. Για να διασφαλιστεί η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), η οθόνη πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σύμφωνα με τις πληροφορίες EMC που παρέχονται σε αυτές τις Οδηγίες χρήσης.

Αυτή η ιατρική μονάδα οθόνης έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής κατηγορίας Β, σύμφωνα με την παράγραφο 15 των κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από παρεμβολές. Αυτή η οθόνη μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να παρεμβάλλεται σε άλλους εξοπλισμούς ραδιοεπικοινωνιών. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν διαπιστωθεί ότι αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, ο χρήστης θα πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές πραγματοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

1. Επανατοποθετήστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
2. Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της ιατρικής οθόνης και του αντικειμένου παρεμβολών.
3. Συνδέστε την οθόνη σε μια πρίζα σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το θέμα της παρεμβολής.
4. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC

Αυτή η ιατρική οθόνη παράγει ή χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή την ιατρική οθόνη μπορεί να προκαλέσουν επιβλαβείς παρεμβολές, εκτός εάν οι τροποποιήσεις εγκριθούν ρητά στο εγχειρίδιο οδηγιών. Ο χρήστης μπορεί να χάσει την εξουσιοδότησή του για τη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού εάν πραγματοποιηθεί μια μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή ή τροποποίηση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η απόδοση των πάνελ μπορεί να επιδεινωθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Περιοδικά ελέγχετε ότι αυτή η οθόνη λειτουργεί σωστά. Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής της συσκευής είναι τέσσερα χρόνια. Διατηρήστε την οθόνη καθαρή για να παρατείνετε τη διάρκεια λειτουργίας της.

1. Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική εκπομπή

Η ιατρική οθόνη προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι η ιατρική οθόνη λειτουργεί σε τέτοιο περιβάλλον.		
Μετρήσεις εκπομπών παρεμβολών	Επίπεδο συμμόρφωσης	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση
Εκπομπές RF σύμφωνα στο CISPR 11	Συμμορφώνεται με την Ομάδα 1	Τα χαρακτηριστικά αυτής της συσκευής καθορίζονται από τη μετάδοση επιτρέπουν τη βιομηχανική και νοσοκομειακή χρήση της (CISPR 11, Class A). Όταν χρησιμοποιείται σε χώρο διαβίωσης (για το οποίο το CISPR 11 απαιτεί συνήθως Κατηγορία Β), αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην παρέχει επαρκή προστασία των ραδιοφωνικών υπηρεσιών. Ο χρήστης πρέπει, εάν είναι απαραίτητο, να λάβει διορθωτικά μέτρα όπως εφαρμογή ή επαναπροσανατολισμός της συσκευής.
Εκπομπές RF σύμφωνα στο CISPR 11	Συμμορφώνεται με την Κατηγορία Β	
Εκπομπή αρμονικών ταλαντώσεων σύμφωνα. έως IEC 61000-3-2	Συμμορφώνεται με την κατηγορία Α	
Διακυμάνσεις τάσης / εκπομπές τρεμοπαίγματος σύμφωνα έως IEC 61000-3-3	Συμμορφώνεται	

2. Για τη χρήση συσκευών ΜΕ σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περιθαλψής.

Καθοδήγηση και δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Η ιατρική οθόνη προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης της ιατρικής οθόνης πρέπει να βεβαιωθεί ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.		
Δοκιμή ατρωσίας παρεμβολών	Επίπεδο συμμόρφωσης IEC 60601-1-2: 2014	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον-καθοδήγηση
Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD) σύμφ. με τη IEC 61000-4-2	± 2 kV, ± 4 kV, ± 6 kV, ± 8 kV απαλλαγή επαφής ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, εκκένωση αέρα ± 15 kV	Τα δάπεδα πρέπει να είναι από ξύλο, σκυρόδεμα ή κεραμικό πλακάκι. Εάν τα δάπεδα είναι καλυμμένα με συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%
Γρήγορες παροδικές ηλεκτρικές παρεμβολές/ρίπες σύμφ. προς την IEC 61000-4-4	Συμμορφώνεται ± 2 kV για γραμμές δικτύου ± 1 kV για γραμμές εισόδου / εξόδου	Η ποιότητα της τάσης τροφοδοσίας πρέπει να αντιστοιχεί σε εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος επιχειρήσεων ή νοσοκομείων
Επιτ. Διαμήκους ταλάντωσης προς IEC 61000-4-5	Συμμορφώνεται ± 1 kV τάση push-pull τάση κοινής λειτουργίας ± 2 kV	Η ποιότητα της τάσης τροφοδοσίας πρέπει να αντιστοιχεί σε εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος επιχειρήσεων ή νοσοκομείων
Μειώσεις τάσης, σύντομες διακοπές και διακυμάνσεις της παροχής τροφοδοσίας. προς την IEC 61000-4-11	0% U _T ; 0,5 κύκλος σε 0 °, 45 °, 90 °, 135 °, 180 °, 225 °, 270 °, 315 ° 0% U _T ; 1 κύκλος και 70% U _T , 25/30 κύκλοι Μονοφασική: στους 0 ° 0% U _T ; 250/300 κύκλος	Η βασική ποιότητα ενέργειας πρέπει να είναι εκείνη ενός τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Εάν ο χρήστης της συσκευής ζητήσει να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και όταν συμβαίνουν διακοπές της τροφοδοσίας, συνιστάται η συσκευή να τροφοδοτείται από τροφοδοτικό που δεν έχει διακοπή.
*Σημείωση: U _T είναι η εναλλασσόμενη τάση δικτύου πριν από την εφαρμογή των επιπέδων δοκιμής.		

3. Για τη χρήση συσκευών ΜΕ σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περιθαλψής.

Προδιαγραφή δοκιμής για ΑΤΡΩΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ σε εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας RF (σύμφωνα με το IEC 60601-1-2: 2014)

Η ιατρική οθόνη προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης της ιατρικής οθόνης πρέπει να βεβαιωθεί ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.						
Συχνότητα δοκιμής MHz	Ζώνη MHz	Υπηρεσία	Διαμόρφωση	Μέγιστη ισχύς W	Απόσταση m	ΔΟΚΙΜΗ ΑΤΡΩΣΙΑΣ V/m
385	380 έως 390	TETRA 400	Διαμόρφωση παλμού 18 Hz	1,8	1,0	27
450	430 έως 470	GMRS 460, FRS 460	FM ± 5 kHz διαδρομή Ημιτονοειδές κύμα ± 1 kHz	2	1,0	28
710	704 έως 787	Band 13, 17	Διαμόρφωση παλμού 217 Hz	0,2	1,0	9
745						
780						
810	800 έως 960	GSM 800/900 TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Διαμόρφωση παλμού 18 Hz	2	1,0	28
870						
930						
1720	1700 έως 1990	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE Band 1,3, 4, 25 UMTS	Διαμόρφωση παλμού 217 Hz	2	1,0	28
1845						
1970						
2450	2400 έως 2570	Bluetooth WLAN 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Διαμόρφωση παλμού 217 Hz	2	1,0	28
5240	5100 έως 5800	WLAN 802.11 a / n	Διαμόρφωση παλμού 217 Hz	0,2	1,0	9
5500						
5785						
*Σημείωση: Εάν είναι απαραίτητο για την επίτευξη του ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ, η απόσταση μεταξύ της κεραίας εκπομπής και της ιατρικής οθόνης μπορεί να μειωθεί σε 1 m. Η απόσταση δοκιμής 1 m επιτρέπεται από το IEC 61000-4-3.						


4. Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσίας - για εξοπλισμό και συστήματα που δεν υποστηρίζουν τη ζωή

Η ιατρική οθόνη προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης της ιατρικής οθόνης πρέπει να βεβαιωθεί ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.			
Δοκιμές ατρωσίας σε παρεμβολές	Επίπεδο δοκιμής IEC 60601-1-2: 2014	Επίπεδο συμμόρφωσης	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - οδηγίες
Διεξαγωγή RF διαταραχές σύμφωνα προς την IEC 61000-4-6 Ακτινοβολούμενη RF διαταραχές σύμφωνα με IEC 61 000-4-3	3 V, rms Από 150 kHz έως < 80 MHz 3 V/m Από 80 MHz έως 2,5 GHz	3 V, ε.φ. 3 V/m	Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών RF δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλησιέστερα σε κανένα τμήμα της ιατρικής οθόνης LCD, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, από την προτεινόμενη απόσταση διαχωρισμού που υπολογίζεται από την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού. Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού $d = 1.2 \sqrt{P}$ Όπου P είναι η ονομαστική ισχύς του πομπού σε watt [W] σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής του πομπού και d είναι η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα [m]. Η ισχύς πεδίου των στατικών πομπών σε όλες τις συχνότητες επί τόπου πρέπει να είναι, σύμφωνα με a μελέτη, μικρότερη από το επίπεδο συμμόρφωσης b. $d = 1.2 \sqrt{P}$ 80 MHz έως <800 MHz $d = 2.3 \sqrt{P}$ Από 800 MHz έως 2,5 GHz Ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές κοντά στον εξοπλισμό που φέρει το ακόλουθο σύμβολο: 
Σημείωση: Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών ποσοτήτων επηρεάζεται από απορροφήσεις και αντανακλάσεις κτιρίων, αντικειμένων και προσώπων.			
a Δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια η ισχύς πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσης για ραδιοφωνικά τηλέφωνα και κινητά ραδιόφωνα εδάφους, ραδιόφωνο ερασιτεχνικού, ραδιοφωνικές εκπομπές AM και FM και τηλεοπτική μετάδοση. Για την εκτίμηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος των στατικών πομπών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια επιτόπια έρευνα. Εάν η μετρούμενη ένταση πεδίου στη θέση στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή υπερβαίνει τα παραπάνω επίπεδα συμμόρφωσης, η συσκευή πρέπει να τηρείται για να επαληθεύεται η κανονική λειτουργία. Εάν παρατηρηθούν ασυνήθιστα χαρακτηριστικά απόδοσης, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, όπως τροποποιημένος προσανατολισμός ή διαφορετική θέση για τη συσκευή. b Σε εύρος συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, οι ένταση πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m.			

5. Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητών και κινητών συσκευών επικοινωνιών RF και αυτής της ιατρικής οθόνης LCD.

Η ιατρική οθόνη προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο ελέγχονται οι διαταραχές RF. Ο χρήστης της συσκευής μπορεί να αποτρέψει τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών RF (πομποί) και της συσκευής - ως συνάρτηση της ισχύος εξόδου της συσκευής επικοινωνίας, όπως φαίνεται παρακάτω.			
Ονομαστική ισχύς του πομπού [W]	Διαχωρισμός σε απόσταση [m] ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού		
	150kHz έως <80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz έως <800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	Από 800 MHz έως 2,5 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
Για πομπούς με μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.			

Σύνδεση του Τροφοδοτικού Ισχύος

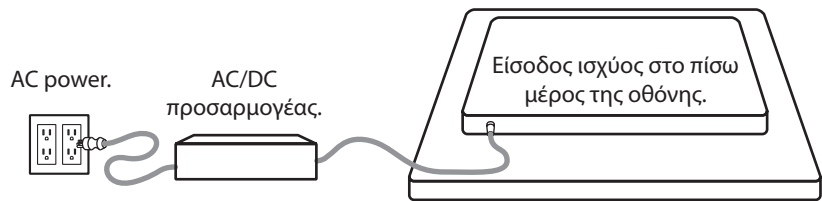

Παρακολούθηση	Μέγιστο μήκος καλωδίου επέκτασης DC * (πόδια)
FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG	75
FM-F2701D, FM-F2701DG, , FM-F3101D, FM-F3101DG	25


* Εάν χρησιμοποιείται μεγαλύτερη επέκταση, υπάρχει κίνδυνος μη φυσιολογικής λειτουργίας του προϊόντος.

Παρελκόμενα

Τεμάχιο	IFU	AC/DC Προσαρμογέας 6.23ft/1.9m	Καλώδιο τροφοδοσίας AC 6ft/1.8m*	Καλώδιο HDMI	Καλώδιο DVI-D	Καλώδιο θύρας Οθόνης	Καλώδιο SDI BNC x 4	Βίδες Στερέωσης
								
 27" FM-A2701D	■	■	■	■	■	■		■
27" FM-A2701DS	■	■	■	■	■	■	■	■
 27" FM-B2702D	■	■	■	■	■	■		■
27" FM-B2702DG	■	■	■	■	■	■	■	■
 27" FM-E2701D	■	■	■	■		■		■
27" FM-E2701DG	■	■	■	■		■	■ x1	■
 27" FM-E2701DT	■	■	■	■		■		■
27" FM-E2701DGT Περιλαμβάνεται καλώδιο αφής USB-B.	■	■	■	■		■	■ x1	■

* ΗΠΑ, ΗΒ, ΕΕ, Κίνα. Βαθμονόμηση νοσοκομείου

Παρελκόμενα

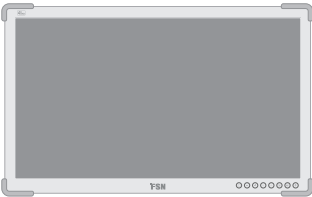
Τεμάχιο	IFU	AC/DC Προσαρμογέας 6.23ft/1.9m	Καλώδιο τροφοδοσίας AC 6ft/1.8m*	Καλώδιο HDMI	Καλώδιο DVI-D	Καλώδιο θύρας Οθόνης	Καλώδιο SDI BNC x 4	Βίδες Στερέωσης
								
 27" FM-F2701D 27" FM-F2701DG	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	■ x1	■ ■
 31" FM-F3101D 31" FM-F3101DG	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	■ x1	■ ■
 31" FS-P3102D 31" FS-P3102DS, 31" FS-P3102DG	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■ ■
 32" FM-E3203D 32" FM-E3203DG	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■ ■

* ΗΠΑ, ΗΒ, ΕΕ, Κίνα. Βαθμονόμηση νοσοκομείου

FM-A2701D



FM-A2701DS

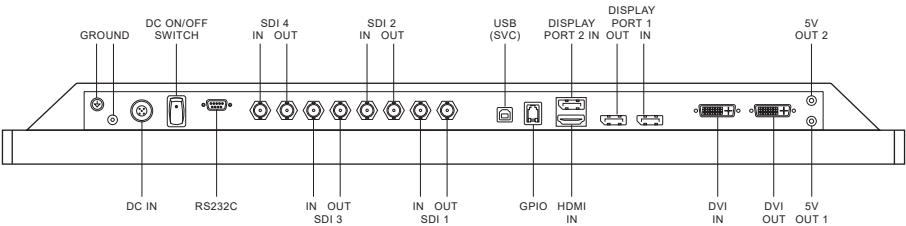

FM-B2702D




FM-B2702DG




FM-E2701D




FM-E2701D

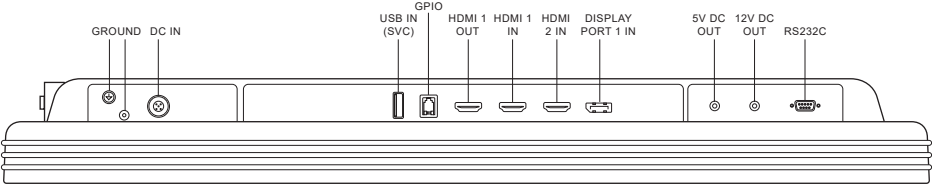


FM-E2701DG

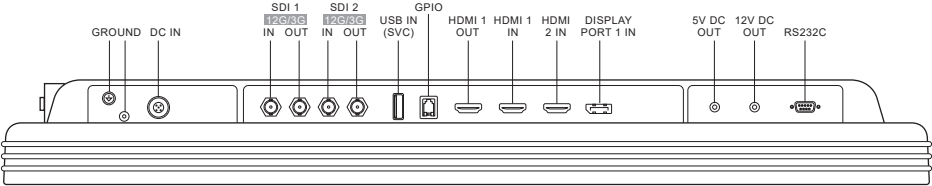



FM-E2701DT

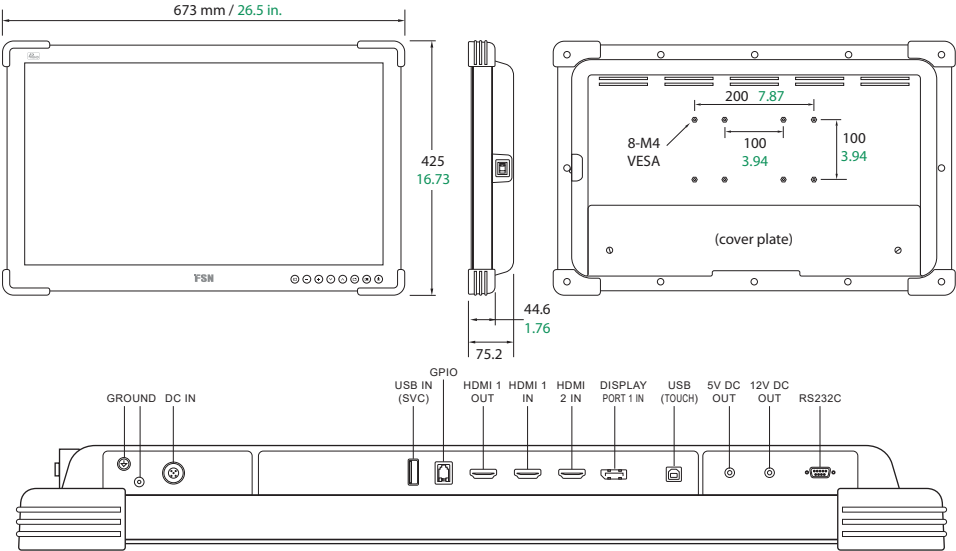


FM-E2701DGT

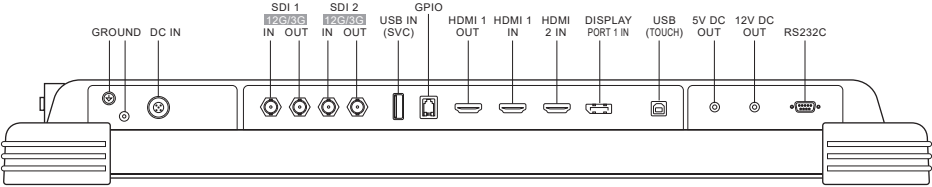

FM-F2701D

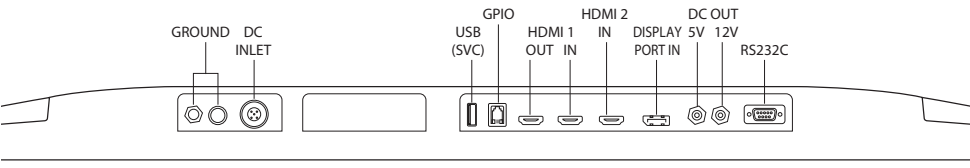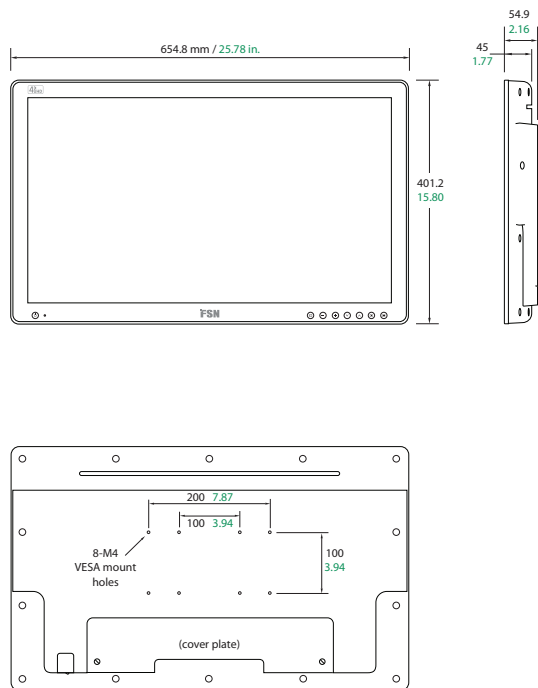

FM-F2701DG

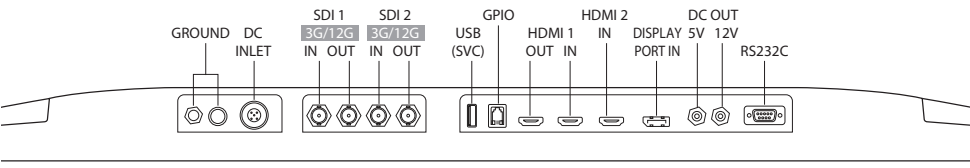


FM-F3101D



FM-F3101DG



FS-P3102D

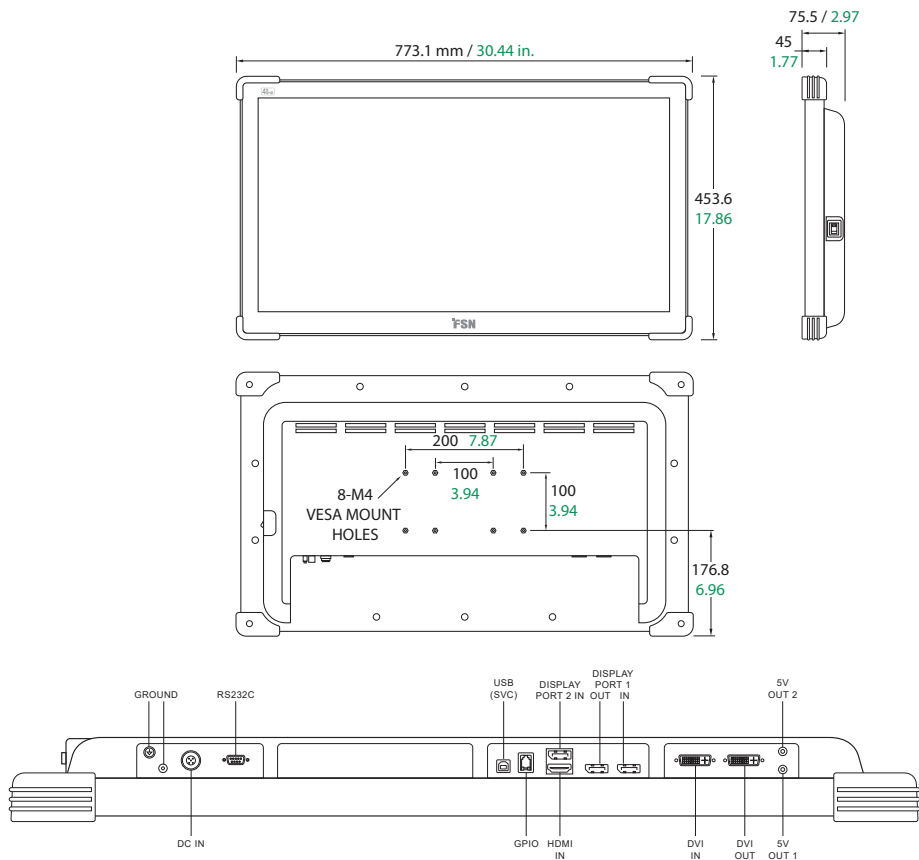



FS-P3102DS




FS-P3102DG



FM-E3203D

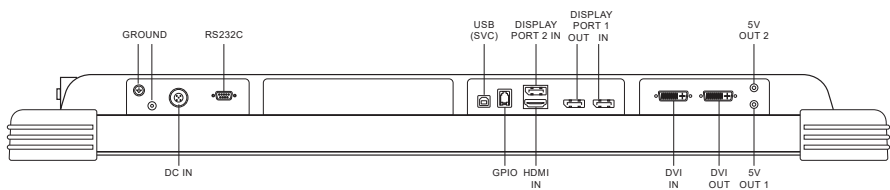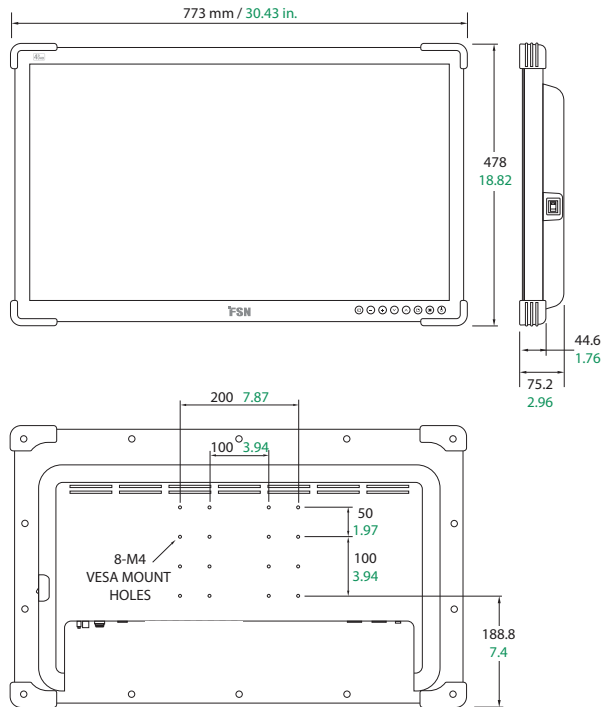

FM-E3203DG

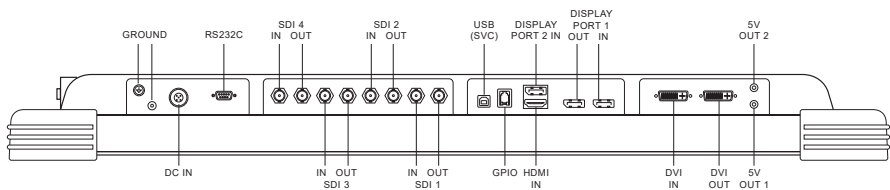

Έλεγχοι

Απεικόνιση Στην Οθόνη (OSD)


FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG

Όταν είναι ενεργοποιημένο το μενού OSD, πατήστε για να μειώσετε τη ρύθμιση της επιλεγμένης λειτουργίας.	Όταν είναι ενεργοποιημένο το μενού OSD, πατήστε για να μετακινήσετε την επιλογή μενού προς τα κάτω.	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία PIP (Εικόνα σε εικόνα). Δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένη η Έξυπνη Είσοδος.	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την οθόνη στην μπροστινή οθόνη της οθόνης. Εάν το εικονίδιο αυτό δεν είναι αναμμένο, τότε ο διακόπτης λειτουργίας στο πίσω μέρος της οθόνης έχει απενεργοποιηθεί.
 INPUT  MINUS	 PLUS  DOWN	 UP  PIP	 MENU  POWER
Πατήστε για να εμφανίσετε το μενού επιλογής εισόδου και για να μετακινήσετε την πηγή σήματος οθόνης. Πατήστε ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ και μετά πατήστε PLUS για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή.	Όταν είναι ενεργοποιημένο το μενού OSD, πατήστε για να εισάγετε ένα υπομενού ή για να αυξήσετε τη ρύθμιση της επιλεγμένης λειτουργίας.	Όταν είναι ενεργοποιημένο το μενού OSD, πατήστε για να μετακινήσετε την επιλογή μενού προς τα πάνω. Πατήστε PLUS και UP μαζί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων.	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το μενού OSD. Όταν το μενού OSD είναι ενεργό, πατήστε για έξοδο από το κύριο μενού ή το υπομενού.

Έλεγχοι

Απεικόνιση Στην Οθόνη (OSD)

FM-F2701D, FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG

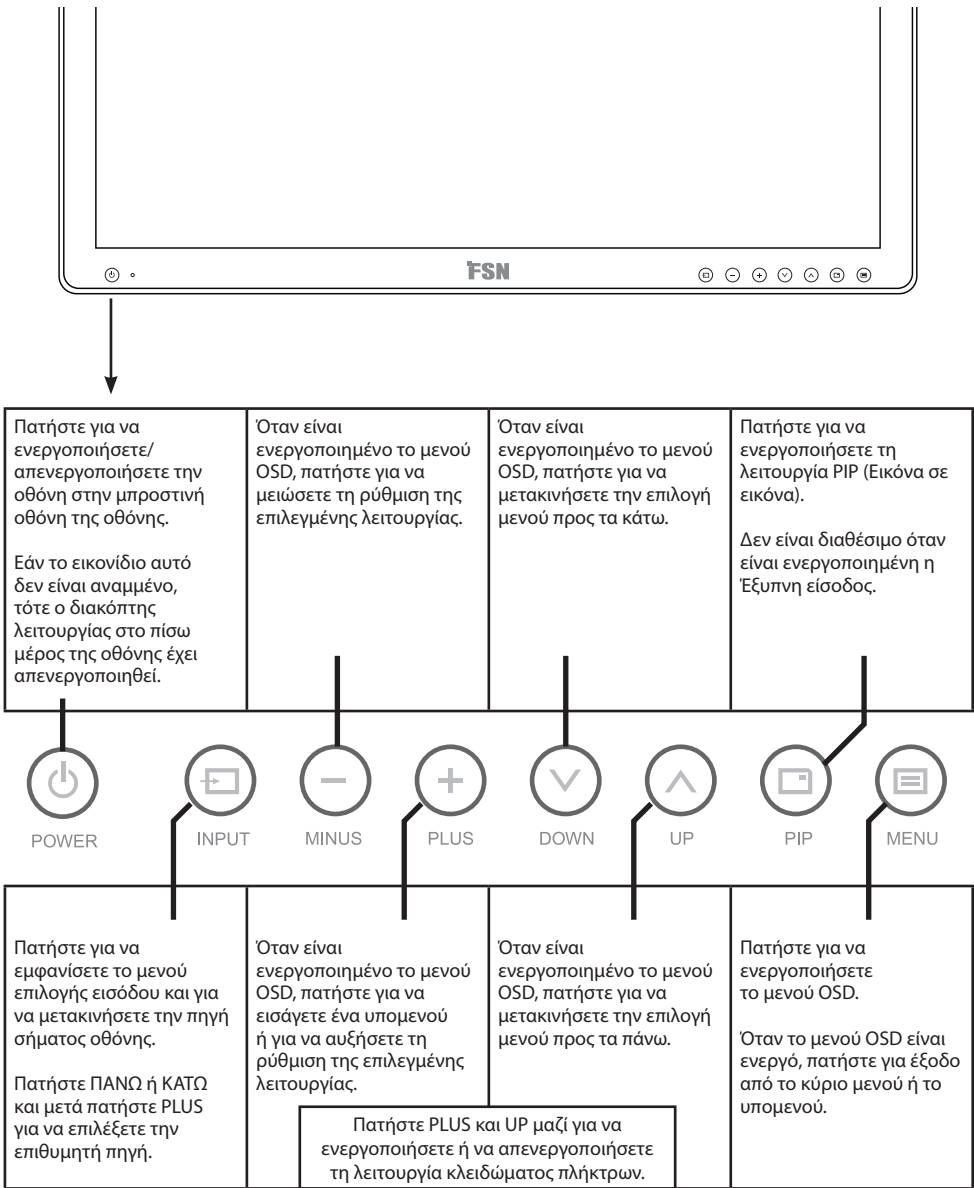

Μενού οθόνης (OSD)

FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG

Οι οθόνες προβολής FSN είναι εξοπλισμένες με ένα πλούσιο σύνολο χαρακτηριστικών για τη ρύθμιση του συστήματος, τις ρυθμίσεις εικόνας και τον έλεγχο οθόνης. Αυτές οι λειτουργίες διαχειρίζονται μέσω της Οθόνης Ενδείξεων ή της OSD. Ορισμένες επιλογές που παρουσιάζονται στο OSD είναι συμφραζόμενες και ποικίλλουν ανάλογα με το ενεργό σήμα εισόδου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Χειριστήρια" για μια πλήρη περιγραφή κάθε κουμπιού OSD.

1. Εισαγωγή στο OSD

Για να ενεργοποιήσετε το μενού OSD, πατήστε το κουμπί MENU στο μπροστινό μέρος της οθόνης. Για να κλείσετε το μενού OSD, πατήστε το κουμπί μενού για έξοδο από το κύριο μενού ή από ένα δευτερεύον μενού.




2. Επιλέξτε μια Κατηγορία Κύριου Μενού

Αφού μπείτε στο OSD, χρησιμοποιήστε τα UP  και DOWN  πλήκτρα στο μπροστινό μέρος της οθόνης οθόνης για να πλοηγηθείτε σε μια κατηγορία κύριου μενού. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΧΡΩΜΑ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ, ΡΥΘΜΙΣΗ ή ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

3. Επιλέξτε μια κατηγορία υπομενού

Αφού εισέλθετε στην επιθυμητή κύρια κατηγορία μενού, πατήστε το **+** για να μπείτε στα υπομενού που σχετίζονται με το επιλεγμένο κύριο μενού. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το UP  και DOWN  για να πλοηγηθείτε στο επιθυμητό υπομενού, στη συνέχεια προσαρμόστε ανάλογα με τις ανάγκες με τα πλήκτρα **+** και **-**. Επιλέξτε το κουμπί MENU για έξοδο από το υπομενού ή το κύριο μενού.

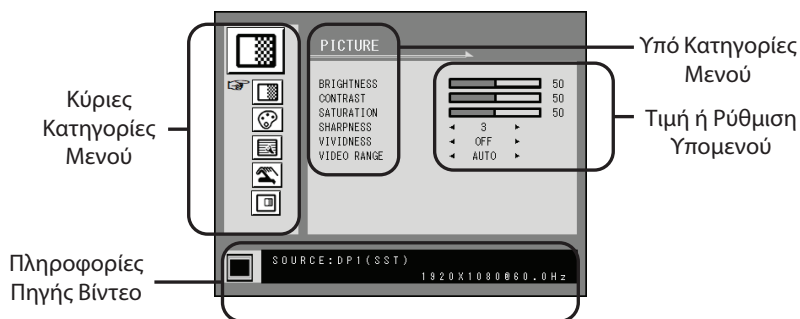

Υπομενού κάτω από το μενού ΕΙΚΟΝΑ

1. BRIGHTNESS Αυξάνει ή μειώνει τη φωτεινότητα. (Εύρος: 0~100)
2. ANTIΘΕΣΗ Αυξάνει ή μειώνει την αντίθεση. (Εύρος: 0~100)
3. SATURATION Αυξάνει ή μειώνει τον κορεσμό. (Εύρος: 0~100)
4. SHARPNESS Αυξάνει ή μειώνει την ευκρίνεια. (Εύρος: 0~4)
5. VIVIDNESS Ορίζει τη ζωντάνια της εικόνας. (Off, Low, Mid, High) Βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας με ελάχιστα τεχνητά εφέ.
6. VIDEO RANGE Επιλέξτε μια ρύθμιση εύρους βίντεο. (0 ~ 255, 16 ~ 235 ή AUTO) 0 ~ 255: για ρύθμιση μορφής RGB.
16 ~ 236: για ρύθμιση μορφής YUV.
AUTO: αλλάζει αυτόματα σε 0 ~ 255 για μορφή RGB ή σε 16 ~ 235 για τη μορφή YUV.

Μενού οθόνης (OSD)



Υπομενού κάτω από το μενού ΧΡΩΜΑ

1. GAMMA Επιλέξτε το κατάλληλο γάμμα. (BYPASS, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM). Το γάμμα δεν μπορεί να αλλάξει όταν ο χρωματικός χώρος είναι BT.709.
2. COLOR SPACE Επιλέξτε τη ρύθμιση χρωματικού χώρου. (ΕΓΓΕΝΗ, BT.709, BT.2020 ή AUTO) ΕΓΓΕΝΗ: για ρύθμιση εγγενών χρωμάτων.
BT.709: για ρύθμιση σήματος HD.
BT.2020: για ρύθμιση σήματος UHD.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ: αλλάζει αυτόματα σε BT.2020 για UHD ή BT.709 για σήμα HD.
3. COLOR MODE Αλλάζει τη ρύθμιση χρώματος εικόνας. (C1, C2, C3, USER)
4. RED Υπόλοιπο κόκκινου. (Λειτουργεί μόνο με το χρήστη USER Mode) (Εύρος: 0~100)
5. GREEN Πράσινη ισορροπία. (Λειτουργεί μόνο με το χρήστη USER Mode) (Εύρος: 0~100)
6. BLUE μπλέ ισορροπία. (Λειτουργεί μόνο με το χρήστη USER Mode) (Εύρος: 0~100)



Υπομενού κάτω από το μενού ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ

1. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Αλλάζει την αναλογία διαστάσεων της προβαλλόμενης εικόνας. (Full, Auto, Fill-H)
2. OVER SCAN Ρυθμίζει το μέγεθος που εμφανίζεται. (0~6)
3. FREEZE Διατηρεί την εικόνα ακίνητη.
4. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ / MIRROR Αλλάζει την εμφανιζόμενη κατεύθυνση της εικόνας. (Κανονική, 180, H-Mirror, V-Mirror)
5. SMART INPUT Ενεργοποιεί τον αυτόματο διακόπτη στην εφεδρική πηγή όταν η κύρια πηγή είναι απενεργοποιημένη.
6. SMART MAIN Όταν η έξυπνη είσοδος είναι ενεργοποιημένη, η τρέχουσα πηγή αλλάζει σε κύρια πηγή.
7. SMART 2ND Όταν η έξυπνη είσοδος είναι ενεργοποιημένη, η εφεδρική πηγή ρυθμίζεται στη 2η πηγή.



Υπομενού στο μενού SETUP

1. LANGUAGE Αλλάζει τη γλώσσα OSD. (10 Γλώσσα)
2. OSD OVERLAY Προσαρμόζει τη διαφάνεια του OSD.
3. ΘΕΣΗ OSD Αλλάζει τη θέση OSD. (9 θέσεις)
4. ΩΡΑ ΜΕΝΟΥ OSD Ρυθμίζει το χρονικό διάστημα που εμφανίζεται το μενού OSD στην οθόνη. (εύρος: 10~60 δευτερόλεπτα)
5. BACKLIGHT Αυξάνει ή μειώνει τον οπισθοφωτισμό. (Εύρος: 0~100)
6. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ DC5V Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την έξοδο DC5V.
7. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Αλλάζει όλες τις τιμές OSD σε εργοστασιακή προεπιλογή.



Υπομενού στο μενού LAYOUT- Απλό

1. LAYOUT Αλλάζει τη διάταξη της εικόνας. (ENIAIA, PBP, PIP)

Υπομενού στο μενού LAYOUT- PBP

1. LAYOUT Αλλάζει τη διάταξη της εικόνας. (ENIAIA, PBP, PIP)
2. WINDOW SELECT Επιλέγει το ενεργό παράθυρο κατά τη διάρκεια PBP ή PIP.
3. INPUT SWAP Αντικαθιστά τη θέση των πρωτογενών και δευτερευόντων εικόνων.

Υπομενού στο μενού LAYOUT- PIP

1. LAYOUT Αλλάζει τη διάταξη της εικόνας. (ENIAIA, PBP, PIP)
2. WINDOW SELECT Επιλέγει το ενεργό παράθυρο κατά τη διάρκεια PBP ή PIP.
3. INPUT SWAP Αντικαθιστά τη θέση των πρωτογενών και δευτερευόντων εικόνων.
4. PIP SIZE Αλλάζει το μέγεθος PIP. (εύρος: 0~10)
5. PIP POSITION Αλλάζει τη θέση PIP. (L-Top, R-Top, Mid, L-Bot, R-Bot)
6. PIP OVERLAY Αλλάζει τη διαφάνεια της εικόνας PIP. (εύρος: 0~8)

Μενού οθόνης (OSD)

FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FM-F2701D, FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG

Οι οθόνες προβολής FSN είναι εξοπλισμένες με ένα πλούσιο σύνολο χαρακτηριστικών για τη ρύθμιση του συστήματος, τις ρυθμίσεις εικόνας και τον έλεγχο οθόνης. Αυτές οι λειτουργίες διαχειρίζονται μέσω της Οθόνης Ενδείξεων ή της OSD. Ορισμένες επιλογές που παρουσιάζονται στο OSD είναι συμφραζόμενες και ποικίλλουν ανάλογα με το ενεργό σήμα εισόδου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Χειριστήρια" για μια πλήρη περιγραφή κάθε κουμπιού OSD.

1. Εισαγωγή στο OSD

Για να ενεργοποιήσετε το μενού OSD, πατήστε το κουμπί MENU στο μπροστινό μέρος της οθόνης. Για να κλείσετε το μενού OSD, πατήστε το κουμπί μενού για έξοδο από το κύριο μενού ή από ένα δευτερεύον μενού.




2. Επιλέξτε μια Κατηγορία Κύριου Μενού

Αφού μπείτε στο OSD, χρησιμοποιήστε τα UP **▲** και DOWN **▼** πλήκτρα στο μπροστινό μέρος της οθόνης οθόνης για να πλοηγηθείτε σε μια κατηγορία κύριου μενού. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΧΡΩΜΑ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ, ΡΥΘΜΙΣΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

3. Επιλέξτε μια κατηγορία υπομενού

Αφού εισέλθετε στην επιθυμητή κύρια κατηγορία μενού, πατήστε το **+** για να μπείτε στα υπομενού που σχετίζονται με το επιλεγμένο κύριο μενού. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το UP **▲** και DOWN **▼** για να πλοηγηθείτε στο επιθυμητό υπομενού, στη συνέχεια προσαρμόστε ανάλογα με τις ανάγκες με τα πλήκτρα **+** και **-**. Επιλέξτε το κουμπί MENU για έξοδο από το υπομενού ή το κύριο μενού.

Μενού οθόνης (OSD)

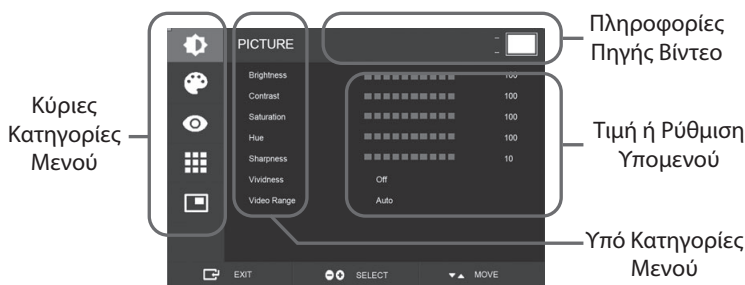

Υπομενού κάτω από το μενού ΕΙΚΟΝΑ

1. BRIGHTNESS Αυξάνει ή μειώνει τη φωτεινότητα. (Εύρος: 0~100)
2. ΑΝΤΙΘΕΣΗ Αυξάνει ή μειώνει την αντίθεση. (Εύρος: 0~100)
3. SATURATION Αυξάνει ή μειώνει τον κορεσμό. (Εύρος: 0~100)
4. HUE Αυξάνει ή μειώνει την απόχρωση. (Εύρος: 0~100)
5. SHARPNESS Αυξάνει ή μειώνει την ευκρίνεια. (Εύρος: 0~10)
6. VIVIDNESS Ορίζει τη ζωντάνια της εικόνας. (Off, Low, Mid, High) Βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας με ελάχιστα τεχνητά εφέ. Η λειτουργία Vividness λειτουργεί όταν το εύρος βίντεο ορίζεται σε 0 ~ 255.
7. VIDEO RANGE Επιλέξτε μια ρύθμιση εύρους βίντεο. (0 ~ 255, 16 ~ 235 ή AUTO) AUTO: αλλάζει αυτόματα σε 0 ~ 255 για μορφή RGB ή σε 16 ~ 235 για άλλες μορφές.
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDR Επιλέξτε μια λειτουργία HDR. (Απενεργοποίηση, PQ, HLG)
Όταν η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDR έχει ρυθμιστεί σε PQ και το σήμα εισόδου συναντά το HDR10, το γάμμα ρυθμίζεται αυτόματα σε PQ (EOTF). Όταν η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDR έχει ρυθμιστεί σε HLG, το gamma ορίζεται σε HLG.

Μενού οθόνης (OSD)



Υπομενού κάτω από το μενού ΧΡΩΜΑ

1. GAMMA Επιλέξτε το κατάλληλο γάμμα. (1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM, BYPASS, PQ(EOTF), HLG). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνο από 1,8 έως BYPASS. Σύμφωνα με τη λειτουργία HDR ρυθμίζεται το κατάλληλο γάμμα (PQ ή HLG).
2. COLOR SPACE Επιλέξτε τη ρύθμιση χρωματικού χώρου. (NATIVE, BT.709, BT.2020 ή AUTO) AUTO: Όταν η ανάλυση εισόδου είναι 4K, ορίζει τον χρωματικό χώρο σε BT.709 ή BT.2020 ανάλογα με τις πληροφορίες χρωματομετρίας. Λιγότερο από 4K, ορίζει τον χρωματικό χώρο σε BT.709.
3. COLOR MODE Αλλάζει τη ρύθμιση χρώματος εικόνας.
4. RED Υπόλοιπο κόκκινου. (Λειτουργεί μόνο με το χρήστη USER Mode) (Εύρος: 0~255)
5. GREEN Πράσινη ισορροπία. (Λειτουργεί μόνο με το χρήστη USER Mode) (Εύρος: 0~255)
6. BLUE Μπλε ισορροπία. (Λειτουργεί μόνο με το χρήστη USER Mode) (Εύρος: 0~255)



Υπομενού κάτω από το μενού ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ

1. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Αλλάζει την αναλογία διαστάσεων της προβαλλόμενης εικόνας. (Full, Auto, FILL H, 4: 3, 5: 4, 16: 9, 1: 1)
 2. OVER SCAN Ρυθμίζει το μέγεθος που εμφανίζεται. (0~10)
 3. PRESET IMAGE Αλλάζει τις ρυθμίσεις εικόνας. (Προεπιλογή χρήση 1 ~ 5)
 4. FREEZE Διατηρεί την εικόνα ακίνητη.
 5. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ / MIRROR Αλλάζει την εμφανιζόμενη κατεύθυνση της εικόνας. (Κανονική, 90, 180, 270, H-Mirror, V-Mirror)
 6. SMART INPUT* Ενεργοποιεί τον αυτόματο διακοπή στην εφεδρική πηγή όταν η κύρια πηγή είναι απενεργοποιημένη.
 7. SMART MAIN* Όταν η έξυπνη είσοδος είναι ενεργοποιημένη, η τρέχουσα πηγή αλλάζει σε κύρια πηγή.
 8. SMART 2ND* Όταν η έξυπνη είσοδος είναι ενεργοποιημένη, η εφεδρική πηγή ρυθμίζεται στη 2η πηγή.
- * Για χρήση μόνο με λειτουργία απλής διάταξης.



Υπομενού στο μενού SETUP

1. LANGUAGE Αλλάζει τη γλώσσα OSD. (10 Γλώσσα μικρό)
2. OSD OVERLAY Προσαρμόζει τη διαφάνεια του OSD.
3. ΘΕΣΗ OSD Αλλάζει τη θέση OSD. (9 θέσεις)
4. ΩΡΑ ΜΕΝΟΥ OSD Ρυθμίζει το χρονικό διάστημα που εμφανίζεται το μενού OSD στην οθόνη. (εύρος: 10~60 δευτερόλεπτα)
5. OSD LOCK Ορίζει το κλειδί OSD. Για ξεκλείδωμα, πατήστε τα κουμπιά PLUS και UP.
6. BACKLIGHT Αυξάνει ή μειώνει τον οπισθοφωτισμό. (Εύρος: 0~100)
7. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ DC5V Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την έξοδο DC5V.
8. RESET Αλλάζει όλες τις τιμές OSD σε εργοστασιακή προεπιλογή.



Υπομενού στο μενού LAYOUT- Απλό

1. LAYOUT Αλλάζει τη διάταξη της εικόνας. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)

Υπομενού στο μενού LAYOUT- PIP

1. LAYOUT Αλλάζει τη διάταξη της εικόνας. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)
2. MODE
3. WINDOW SELECT Επιλέγει το ενεργό παράθυρο.
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Αντικαθιστά τη θέση των πρωτογενών και δευτερευόντων εικόνων.
5. PIP SIZE Αλλάζει το μέγεθος PIP.
6. PIP POSITION Αλλάζει τη θέση PIP. (L-Top, R-Top, Mid, L-Bot, R-Bot)

Υπομενού στο μενού LAYOUT- PBP

1. LAYOUT Αλλάζει τη διάταξη της εικόνας. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)
2. MODE Αλλάζει τον τρόπο διάταξης. (Mode 1, Mode 2, Mode 3)
3. WINDOW SELECT Επιλέγει το ενεργό παράθυρο.
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Αντικαθιστά τη θέση των πρωτογενών και δευτερευόντων εικόνων.

Υπομενού στο μενού LAYOUT- Τριπλό

1. LAYOUT Αλλάζει τη διάταξη της εικόνας. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)
2. MODE Αλλάζει τον τρόπο διάταξης. (Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4)
3. WINDOW SELECT Επιλέγει το ενεργό παράθυρο.


Υπομενού στο μενού LAYOUT- Τετραπλό

1. LAYOUT Αλλάζει τη διάταξη της εικόνας. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)
2. MODE Αλλάζει τον τρόπο διάταξης. (Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4, Mode 5)
3. WINDOW SELECT Επιλέγει το ενεργό παράθυρο.


Διάταξη παραθύρου

FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FS-P3102D,
FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG

Ενιαίο Παράθυρο

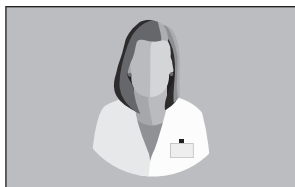

Εικόνα σε εικόνα (PiP)

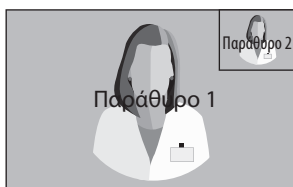


Εικόνα ανά εικόνα (PBP)




Συμβατότητα πηγής SDI

Μονό 3G-SDI (1080p 60Hz)

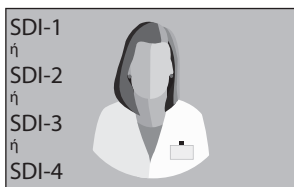

3G-SDI 2-SI

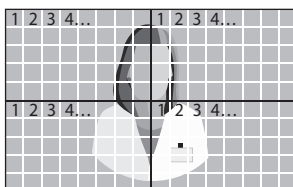


3G-SDI 2-SI Τετραπλό



Για τη ρύθμιση τετραπλής προβολής 'quad' SDI, κάθε σύνδεσμος πρέπει να αντιστοιχεί στις τέσσερις περιοχές εικόνας όπως φαίνεται παραπάνω.

12G-SDI μονό (2160p 60Hz)

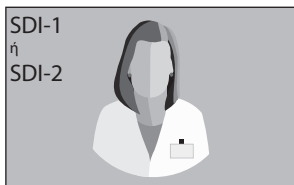

Για ρύθμιση μονής προβολής SDI, χρησιμοποιήστε το μενού INPUT για να επιλέξετε ποια πηγή SDI θα πρέπει να ενεργοποιηθεί.


Διάταξη παραθύρου

FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FM-F2701D,
FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG


Ενιαίο Παράθυρο



Εικόνα σε εικόνα (PiP)

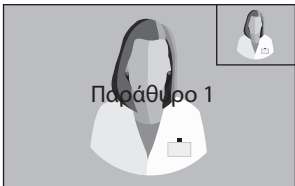

Εικόνα ανά εικόνα (PBP)

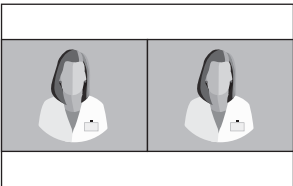

Mode 1



Mode 2



Mode 3


Τριπλό




Mode 1



Mode 2

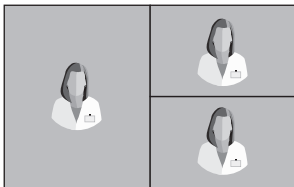

Mode 3

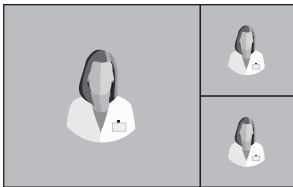

Mode 4


Διάταξη παραθύρου

FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FM-F2701D,
FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG


Τετραπλό




Mode 1

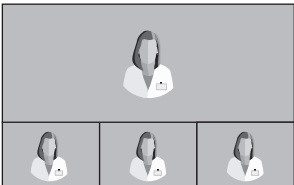

Mode 2

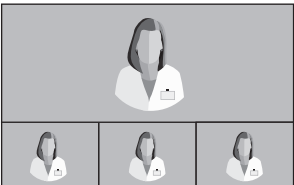

Mode 3

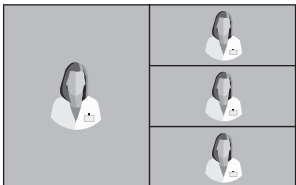

Mode 4



Mode 5

Πίνακας Τυπικών Σημάτων

FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG

Ανάλυση	Πληροφορίες χρονισμού			Πηγή σήματος			
	H-Freq (KHz)	V-Freq (Hz)	Clock (MHz)	DP	HDMI	DVI	SDI
800 x 600 @56Hz	35,16	56,25	36,00	•	•	•	
800 x 600 @60Hz	37,88	60,32	40,00	•	•	•	
800 x 600 @72Hz	48,08	72,19	50,00	•	•	•	
800 x 600 @75Hz	46,88	75,00	49,50	•	•	•	
800 x 600 @85Hz	53,67	85,06	56,25	•	•	•	
1024 x 768 @60Hz	48,36	60,00	65,00	•	•	•	
1024 x 768 @70Hz	56,48	70,07	75,00	•	•	•	
1024 x 768 @75Hz	60,02	75,03	78,75	•	•	•	
1024 x 768 @85Hz	68,68	85,00	94,50	•	•	•	
1152 x 864 @75Hz	67,50	75,00	108,00	•	•	•	
1280 x 960 @60Hz	60,00	60,00	108,00	•	•	•	
1280 x 960 @85Hz	85,94	85,00	148,50	•	•	•	
1280 x 1024 @60Hz	63,98	60,02	108,50	•	•	•	
1280 x 1024 @75Hz	79,98	75,02	135,00	•	•	•	
1280 x 1024 @85Hz	91,15	85,02	157,50	•	•	•	
720p @50Hz	37,50	50,00	74,25	•	•	•	•
720p @59.94Hz	44,96	59,94	74,176	•	•	•	•
720p @60Hz	45,00	60,00	74,25	•	•	•	•
1080i @50Hz	28,13	50,00	74,25				•
1080i @59.94Hz	33,72	59,94	74,167				•
1080P @50Hz	56,25	50,00	148,50	•	•	•	•
1080P @59.94Hz	67,43	59,94	148,352	•	•	•	•
1080P @60Hz	67,50	60,00	148,50	•	•	•	•
1920 x 2160 @60Hz	133,29	59,99	277,25	•	•		
3840 x 2160 @30Hz	67,50	30,00	297.00	•	•		• 1
3840x2160 @50Hz	112,50	50,00	594,00	•	•		• 2
3840 x 2160 @59.94Hz	134,87	59,94	593,407	•	•		• 2
3840 x 2160 @60Hz	135,00	60,00	594,00	•	•		• 2

Πρόσθετο για FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG

4096 x 2160 @30Hz	67,50	30,00	297,00	•	•		
4096 x 2160 @50Hz	112,50	50,00	594,00	•	•		• 2
4096 x 2160 @59.94Hz	134,87	59,94	593,407	•	•		• 2
4096 x 2160 @60Hz	135,00	60,00	594,00	•	•		• 2

¹ Πρόσθετο για FM-B2702DG, FM-E3203DG.

² SDI τεταρτημόριο και 2 δείγμα διαίρεσης μόνο.

FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FM-F2701D,
FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG

Προδιαγραφή

FM-A2701D, FM-A2701DS

Τεμάχιο		Περιγραφή
Πίνακας		27 LCD TFT ιντσών (LED)
Ανάλυση		3840 x 2160 pixels
Αναλογία απεικόνισης		16 : 9
Ενεργός χώρος		596,74 (H)mm x 335,66 (V)mm
Pixel Pitch (mm)		0,1554 x 0,1554
Χρόνος απόκρισης (τυπικός)		14 ms (γκρι σε γκρι)
Αριθμός χρωμάτων		1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Φωτεινότητα (τυπική)		800 cd/m ²
Πλήρης κλίμακα		BT.709 και BT.2020 συμβατά
Λόγος αντίθεσης (τύπος)		1000 : 1
Επιφανειακή επεξεργασία		Αντιθαμβωτικό
Γωνία θέασης (CR> 10)		R/L 178°, U/D 178°
Σήμα εισόδου		1 x HDMI 2.0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (ενιαία σύνδεση) 4 x SDI (3G) διαθέσιμο σε FM-A2701DS
Σήμα εξόδου		1 x DVI (ενιαία σύνδεση) 1 x DP 1.2 (SST) 4 x SDI (3G) διαθέσιμο σε FM-A2701DS
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		Μετασχηματιστής AC / DC (AC 100 ~ 240V, DC 24V / 6,6A)
Κατανάλωση ενέργειας		FM-A2701D 90W μέγ FM-A2701DS 110W μέγ
Καθυστέρηση (συνήθης)		2 ms
Διαστάσεις Μονάδας		658,8(W) x 426(H) x 60(D) mm 25,94(W) x 16,77(H) x 2,36(D) (ίντσες)
Μέγεθος Πακέτου		755,65(W) x 654,05(H) x 234,95(D) mm 29,75(W) x 25,75(H) x 9,25(D) (ίντσες)
IP Rating		IP31 - συνολικά
Βάρος	FM-A2701D	8,18 kg, 18,03 lbs. (οθόνη με κάλυμμα) 13,19 kg, 29,08 lbs. (πακέτο αποστολής)
	FM-A2701DS	8,8 kg, 19,4 lbs. (οθόνη με κάλυμμα) 13,81 kg, 30,45 lbs. (πακέτο αποστολής)

Προδιαγραφή

FM-B2702D, FM-B2702DG

Τεμάχιο		Περιγραφή
Πίνακας		27 LCD TFT ιντσών (LED)
Ανάλυση		3840 x 2160 pixels
Αναλογία απεικόνισης		16 : 9
Ενεργός χώρος		596,74 (H)mm x 335,66 (V)mm
Pixel Pitch (mm)		0,1554 x 0,1554
Χρόνος απόκρισης (τυπικός)		11 msec (τυπικός χρόνος ανόδου)
Αριθμός χρωμάτων		1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Φωτεινότητα (τυπική)		800 cd/m ²
Πλήρης κλίμακα		BT.709 και BT.2020 συμβατά
Λόγος αντίθεσης (τύπος)		1400 : 1
Επιφανειακή επεξεργασία		Αντι-αντανakλαστικό, κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων
Γωνία θέασης (CR> 10)		R/L 178°, U/D 178°
Σήμα εισόδου		1 x HDMI 2.0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (ενιαία σύνδεση) 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) διαθέσιμα στο FM-B2702DG
Σήμα εξόδου		1 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (ενιαία σύνδεση) 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) διαθέσιμα στο FM-B2702DG
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		Μετασχηματιστής AC / DC (AC 100 ~ 240V, DC 24V / 6,6A)
Κατανάλωση ενέργειας		FM-B2702D - 85W FM-B2702DG - 100W
Καθυστέρηση (συνήθης)		2 ms
Διαστάσεις Μονάδας		673(W) x 425(H) x 75,2(D) mm 26,50(W) x 16,73(H) x 2,96(D) (ίντσες)
Μέγεθος Πακέτου		755,65(W) x 654,05(H) x 234,95(D) mm 29,75(W) x 25,75(H) x 9,25(D) (ίντσες)
IP Rating		IP33 - συνολικά
Βάρος	FM-B2702D	8,73 kg, 19,25 lbs. (οθόνη με κάλυμμα) 13,45 kg, 29,65 lbs. (πακέτο αποστολής)
	FM-B2702DG	9,2 kg, 20,28 lbs. (οθόνη με κάλυμμα) 14,1 kg, 31,09 lbs. (πακέτο αποστολής)

Προδιαγραφή

FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT

Τεμάχιο		Περιγραφή	
Πίνακας		27 LCD TFT ιντσών (LED)	
Ανάλυση		3840 x 2160 pixels	
Ενεργός χώρος		596,16 (H)mm x 335,34 (V)mm	
Οθόνη αφής (FM-E2701DT, DGT)		Προβαλλόμενο χωρητικό USB	
Pixel Pitch (mm)		0,15525 x 0,15525	
Χρόνος απόκρισης (τυπικός)		16 msec (χρόνος ανόδου + πτώσης)	
Διάταξη εικονοστοιχείων		Κάθετες ρίγες RGB	
Αριθμός χρωμάτων		1,07 δισεκατομμύρια χρώματα	
Φωτεινότητα (τυπική)		700 cd/m² (FM-E2701D, FM-E2701DG) 600 cd/m² (FM-E2701DT, FM-E2701DGT)	
Πλήρης κλίμακα		BT.709 και BT.2020 συμβατά	
Λόγος αντίθεσης (τύπος)		1000 : 1	
Επιφανειακή επεξεργασία		Αντιθαμβωτικό (FM-E2701DG)	
Γωνία θέασης (CR> 10)		R/L 178°, U/D 178°	
Σήμα εισόδου		2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 (SST) 2 x SDI (3G, 12G) διαθέσιμα στο FM-E2701DG, FM-E2701DGT	
Σήμα εξόδου		1 x HDMI 2.0 2 x SDI (3G, 12G) διαθέσιμα στο FM-E2701DG, FM-E2701DGT	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		Μετασχηματιστής AC / DC (AC 100 ~ 240V, DC 24V / 6,6A)	
Έξοδος ισχύος		Έξοδος DC (1 x 12V/2A, 1 x 5V/2A)	
Κατανάλωση ενέργειας		110W max (FM-E2701D, FM-E2701DT) 130W max (FM-E2701DG, FM-E2701DGT)	
Καθυστέρηση (συνήθης)		1 ms	
Διαστάσεις Μονάδας	FM-E2701D FM-E2701DG	671(W) x 423(H) x 74,2(D) mm 26,42(W) x 16,65(H) x 2,92(D) (ίντσες)	
	FM-E2701DT FM-E2701DGT	673(W) x 425(H) x 75,2(D) mm 26,50(W) x 16,73(H) x 2,96(D) (ίντσες)	
Μέγεθος Πακέτου		755,65(W) x 654,05(H) x 234,95(D) mm 29,75(W) x 25,75(H) x 9,25(D) (ίντσες)	
IP Rating		IP33 - συνολικά	IP33: Aizsardzība pret cietu svešķermeņu iekļūšanu, kuru diametrs ir 2,5 mm vai lielāks. IP33: Aizsardzība pret ūdens pilieniem, kas izsmidzināti līdz 60° leņķi no vertikāles.
Βάρος	FM-E2701D	9,17 kg, 20,21 lbs. (οθόνη με κάλυμμα)	13,7 kg, 30,2 lbs. (πακέτο αποστολής)
	FM-E2701DG	9,40 kg, 20,72 lbs. (οθόνη με κάλυμμα)	14,1 kg, 31,08 lbs. (πακέτο αποστολής)
	FM-E2701DT	8,75 kg, 19,29 lbs. (οθόνη με κάλυμμα)	13,5 kg, 31,30 lbs. (πακέτο αποστολής)
	FM-E2701DGT	9,0 kg, 19,84 lbs. (οθόνη με κάλυμμα)	13,9 kg, 30,64 lbs. (πακέτο αποστολής)

Προδιαγραφή

Οθόνη αφής

Τεμάχιο	Περιγραφή
Τύπος	ITO Projected Capacitive οθόνη αφής
Τάση λειτουργίας	5V
Διαφάνεια	> 85%
Διεπαφή	USB (1.1)
Σημείο επαφής	10 πόντοι

Υποστήριξη OS αφής

OS	Έκδοση			
Windows	Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows Embedded 8 Embedded 8.1 Industry Embedded 8.1 Pro Embedded 8 Standard Windows 7 Windows Embedded 7 Embedded Enterprise 7 Embedded Standard 7 Embedded POSReady 7 Windows XP Windows Embedded POSReady 2009 Windows 2000			
Windows CE	Windows CE 4.0-6, Embedded Compact 7, 2013			
Linux	Το δημόσιο πρόγραμμα οδήγησης Linux υποστηρίζει το μεγαλύτερο μέρος της διανομής Linux, συμπεριλαμβανομένων των Ubuntu, Debian, SuSE(open-SuSE), Fedora Core, Mandriva, Slackware κ.ο.κ. Παρακαλούμε κατεβάστε τα προγράμματα οδήγησης σύμφωνα με την έκδοση του πυρίνα σας.			
	Kernel	X86 / X-window		ARM / MIPS
		32 bits	64 bits	
	3.x.x / 4.x.x / 5.x.x	✓	✓	✓
	2.6.36 or Later	✓	✓	✓
	2.6.24 - 2.6.35	✓	✓	✗
	2.6.23 - Older	✓	✓	✗
	2.4.x	✓	✗	✗
Android	Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης υποστηρίζει την έκδοση Android 2.3.x και άνω (από το Gingerbread έως την τελευταία έκδοση Android). Μπορεί να υποστηρίζει διεπαφή USB/UART για προϊόντα αφής EETI. Κατεβάστε το πρόγραμμα οδήγησης και ανατρέξτε στον οδηγό προγραμματισμού για εγκατάσταση.			
Mac	eGalaxHidDaemon 2.2.4	Mac OS 15 Sequoia Mac OS 14 Sonoma Mac OS 13 Ventura		2024.12.11
	eGalaxHidDaemon 2.0.5	Mac OS 12 Monterey		2023.11.27
	eGalaxHidDaemon v1 .6	Mac OS 11 Big Sur Mac OS 10.11 - 10.15 (El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina)		2022.01.14
	1.23.0925.a 64bit	Mac OS X 10.10.x Yosemite		2015.04.22
	1.23.0925.89 64bit	Mac OS X 10.9.x Mavericks Mac OS X 10.8.x Mountain Lion Mac OS X 10.7.5 (64bit)		2015.04.22
	1.23.1507.75	Mac OS X 10.7.5 (32Bit)		2015.04.22
	1.20.1004 64bit	Mac OS X 10.7.4 Earlier (64Bit)		2014.01.22
	1.20.1004_32bit	Mac OS X 10.7.4 Earlier (32Bit)		2014.01.22
	1.1 7.4003	Mac OS X 10.5.3 Leopard (Power PC)		2014.10.14
QNX	QNX Neutrino RTOS V6.5 / 6.4	> 1.2.3314 RS232 2015.08.14		
		> 1.9.4828 USB 2014.11.28		
	QNX Neutrino RTOS V6.3	> 1.01.5608 RS232 2009.08.31		
		> 1.4.8913 USB 2014.11.28		

Προδιαγραφή

FM-F2701D, FM-F2701DG

Τεμάχιο		Περιγραφή
Πίνακας		27 ιντσών OLED
Ανάλυση		3840 x 2160 pixels
Ενεργός χώρος		596,16 (H)mm x 335,34 (V)mm
Pixel Pitch (mm)		0,15525 x 0,15525
Χρόνος απόκρισης (τυπικός)		0,1 ms (χρόνος ανόδου + πτώσης)
Διάταξη εικονοστοιχείων		Κάθετες ρίγες RGB
Αριθμός χρωμάτων		1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Φωτεινότητα (τυπική)		540 cd/m ²
Πλήρης κλίμακα		BT.709 και BT.2020 συμβατά
Λόγος αντίθεσης (τύπος)		1,000,000 : 1
Επιφανειακή επεξεργασία		Αντι-αντανakλαστικό, κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων
Γωνία θέασης (CR> 10)		R/L 178°, U/D 178°
Σήμα εισόδου		2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 (SST) 2 x SDI (3G, 12G) διαθέσιμα στο FM-F2701DG
Σήμα εξόδου		1 x HDMI 2.0 2 x SDI (3G, 12G) διαθέσιμα στο FM-F2701DG
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		Μετασχηματιστής AC / DC (AC 100 ~ 240V, DC 24V / 6,6A)
Έξοδος ισχύος		Έξοδος DC (1 x 12V/2A, 1 x 5V/2A)
Κατανάλωση ενέργειας		120W μέγ (FM-F2701D) 135W μέγ (FM-F2701DG)
Καθυστέρηση (συνήθης)		17 ms
Διαστάσεις Μονάδας		654,8(W) x 401.2(H) x 54.9(D) mm 25,8(W) x 15,8(H) x 2,2(D) (ίντσες)
Μέγεθος Πακέτου		860(W) x 780(H) x 200(D) mm 33,86(W) x 30,71(H) x 7,87(D) (ίντσες)
IP Rating		IP33 - συνολικά IP33: Aizsardzība pret cietu svešķermeņu iekļūšanu, kuru diametrs ir 2,5 mm vai lielāks. IP33: Aizsardzība pret ūdens pilieniem, kas izsmidzināti līdz 60° leņķi no vertikāles.
Βάρος	FM-F2701D	6,33 kg, 13,96 lbs. (οθόνη με κάλυμμα) 10,05 kg, 22,15 lbs. (πακέτο αποστολής)
	FM-F2701DG	6,5 kg, 14,33 lbs. (οθόνη με κάλυμμα) 10,45 kg, 23,23 lbs. (πακέτο αποστολής)

Προδιαγραφή

FM-F3101D, FM-F3101DG

Τεμάχιο		Περιγραφή
Πίνακας		31.5 ιντσών OLED
Ανάλυση		3840 x 2160 pixels
Ενεργός χώρος		697,92 (H)mm x 392,6 (V)mm
Pixel Pitch (mm)		0,18175 x 0,18175
Χρόνος απόκρισης (τυπικός)		0,1 ms (χρόνος ανόδου + πτώσης)
Διάταξη εικονοστοιχείων		Κάθετες ρίγες RGB
Αριθμός χρωμάτων		1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Φωτεινότητα (τυπική)		540 cd/m ²
Πλήρης κλίμακα		BT.709 και BT.2020 συμβατά
Λόγος αντίθεσης (τύπος)		1,000,000 : 1
Επιφανειακή επεξεργασία		Αντι-αντανakλαστικό, κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων
Γωνία θέασης (CR> 10)		R/L 178°, U/D 178°
Σήμα εισόδου		2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 (SST) 2 x SDI (3G, 12G) διαθέσιμα στο FM-F3101DG
Σήμα εξόδου		1 x HDMI 2.0 2 x SDI (3G, 12G) διαθέσιμα στο FM-F3101DG
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		Μετασχηματιστής AC / DC (AC 100 ~ 240V, DC 24V / 6,6A)
Έξοδος ισχύος		Έξοδος DC (1 x 12V/2A, 1 x 5V/2A)
Κατανάλωση ενέργειας		140W μέγ (FM-F3101D) 155W μέγ (FM-F3101DG)
Καθυστέρηση (συνήθης)		17 ms
Διαστάσεις Μονάδας		757(W) x 464(H) x 54.7(D) mm 29,8(W) x 18,27(H) x 2,15(D) (ίντσες)
Μέγεθος Πακέτου		860(W) x 780(H) x 200(D) mm 33,86(W) x 30,71(H) x 7,87(D) (ίντσες)
IP Rating		IP33 - συνολικά IP33: Aizsardzība pret cietu svešķermeņu iekļūšanu, kuru diametrs ir 2,5 mm vai lielāks. IP33: Aizsardzība pret ūdens pilieniem, kas izsmidzināti līdz 60° leņķi no vertikāles.
Βάρος	FM-F3101D	9,06 kg, 19,97 lbs. (οθόνη με κάλυμμα) 13,91 kg, 30.67 lbs. (πακέτο αποστολής)
	FM-F3101DG	9,23 kg, 20,35 lbs. (οθόνη με κάλυμμα) 14,13 kg, 31.15 lbs. (πακέτο αποστολής)

Προδιαγραφή

FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG

Τεμάχιο		Περιγραφή
Πίνακας		31 LCD TFT ιντσών (LED)
Ανάλυση		4096 x 2160 pixels
Αναλογία απεικόνισης		17 : 9
Ενεργός χώρος		697,958 (H)mm x 368,064 (V)mm
Pixel Pitch (mm)		0,1704 x 0,1704
Χρόνος απόκρισης (τυπικός)		11 msec (τυπικός χρόνος ανόδου)
Αριθμός χρωμάτων		1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Φωτεινότητα (τυπική)		350 cd/m ²
Πλήρης κλίμακα		BT.709 και BT.2020 συμβατά
Λόγος αντίθεσης (τύπος)		1500 : 1
Επιφανειακή επεξεργασία		Αντι-αντανακλαστικό, κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων
Γωνία θέασης (CR> 10)		R/L 178°, U/D 178°
Σήμα εισόδου		1 x HDMI 2.0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (ενιαία σύνδεση) 4 x SDI (3G) διαθέσιμο σε FS-P3102DS 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) διαθέσιμα σε FS-P3102DG
Σήμα εξόδου		1 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (ενιαία σύνδεση) 4 x SDI (3G) διαθέσιμο σε FS-P3102DS 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) διαθέσιμα σε FS-P3102DG
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		Μετασχηματιστής AC / DC (AC 100 ~ 240V, DC 24V / 6,6A)
Κατανάλωση ενέργειας		FS-P3102D - 90W FS-P3102DS, FS-P3102DG 110W
Καθυστέρηση (συνήθης)		2 ms
Διαστάσεις Μονάδας		773,1(W) x 453,6(H) x 75,5(D) mm 30,44(W) x 17,86(H) x 2,97(D) (ίντσες)
Μέγεθος Πακέτου		914,4(W) x 749,3(H) x 234,95(D) mm 36(W) x 29,5(H) x 9,25(D) (ίντσες)
IP Rating		IP33 - συνολικά
Βάρος	FS-P3102D	10,62 kg, 23,41 lbs. (οθόνη με κάλυμμα) 16,46 kg, 36,29 lbs. (πακέτο αποστολής)
	FS-P3102DS	11,24 kg, 24,78 lbs. (οθόνη με κάλυμμα)
	FS-P3102DG	17,34 kg, 38,23 lbs. (πακέτο αποστολής)

Προδιαγραφή

FM-E3203D, FM-E3203DG

Τεμάχιο		Περιγραφή
Πίνακας		32 LCD TFT ιντσών (LED)
Ανάλυση		3840 x 2160 pixels
Αναλογία απεικόνισης		16 : 9
Ενεργός χώρος		708,48 (H)mm x 398,82 (V)mm
Pixel Pitch (mm)		0,1845 x 0,1845
Χρόνος απόκρισης (τυπικός)		8 msec (τυπικός χρόνος ανόδου)
Αριθμός χρωμάτων		1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Φωτεινότητα (τυπική)		700 cd/m ²
Πλήρης κλίμακα		BT.709 και BT.2020 συμβατά
Λόγος αντίθεσης (τύπος)		1350 : 1
Επιφανειακή επεξεργασία		Αντι-αντανakλαστικό, κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων
Γωνία θέασης (CR> 10)		R/L 178°, U/D 178°
Σήμα εισόδου		1 x HDMI 2.0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (ενιαία σύνδεση) 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) διαθέσιμα στο FM-E3203DG
Σήμα εξόδου		1 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (ενιαία σύνδεση) 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) διαθέσιμα στο FM-E3203DG
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		Μετασχηματιστής AC / DC (AC 100 ~ 240V, DC 24V / 6,6A)
Κατανάλωση ενέργειας		FM-E3203D 105W μέγ FM-E3203DG 125W μέγ
Καθυστέρηση (συνήθης)		2 ms
Διαστάσεις Μονάδας		773(W) x 478(H) x 75,2(D) mm 30,43(W) x 18,82(H) x 2,96(D) (ίντσες)
Μέγεθος Πακέτου		914,4(W) x 749,3(H) x 234,95(D) mm 36(W) x 29,5(H) x 9,25(D) (ίντσες)
IP Rating		IP33 - συνολικά
Βάρος	FM-E3203D	11,56 kg, 25,49 lbs. (οθόνη με κάλυμμα) 16,83 kg, 37,10 lbs. (πακέτο αποστολής)
	FM-E3203DG	11,80 kg, 26,01 lbs. (οθόνη με κάλυμμα) 17,5 kg, 38,58 lbs. (πακέτο αποστολής)

Οδηγίες καθαρισμού



Ακολουθήστε το νοσοκομειακό σας πρωτόκολλο για το χειρισμό του αίματος και των σωματικών υγρών. Καθαρίστε την οθόνη με ένα αραιό μείγμα ήπιας απορρυπαντικής ουσίας και νερού. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή πετσέτα ή βαμβάκι. Η χρήση ορισμένων απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσει καταστροφή των ετικετών και των πλαστικών εξαρτημάτων του προϊόντος. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή καθαριστικών για να διαπιστώσετε αν η ενεργή ουσία καθαρισμού συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα. Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρού στην οθόνη.

Προφυλάξεις

- Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά ή γρατζουνιά στο μπροστινό φίλτρο ή στην οθόνη.
- Μην χρησιμοποιείτε πανί κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό (πολυεστέρα), καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροστατικό αποχρωματισμό στην οθόνη οθόνη.
- Ακολουθήστε το νοσοκομειακό σας πρωτόκολλο σε περίπτωση που η οθόνη πρέπει να απολυμανθεί πριν από την εγκατάσταση.

Μπροστινό φίλτρο

1. Αφαιρέστε τη σκόνη με ένα στεγνό μαλακό βαμβακερό πανί που δεν αφήνει χνούδι και δεν είναι λειαντικό.
2. Αφαιρέστε τα δακτυλικά αποτυπώματα ή το λίπος χρησιμοποιώντας ένα μαλακό βαμβακερό ύφασμα χωρίς χνούδι που δεν αφήνει χνούδι και το οποίο είναι ελαφρά εμποτισμένο με καθαρό νερό ή ένα ήπιο εμπορικό προϊόν καθαρισμού γυαλιού κατάλληλο για επιχρισμένες γυάλινες επιφάνειες.
3. Σκουπίστε απαλά με ένα στεγνό βαμβακερό ύφασμα.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε στο μπροστινό φίλτρο:

- Αλκοόλ / διαλύτες σε υψηλότερη συγκέντρωση > 5% • Ισχυρά αλκάλια, ισχυροί διαλύτες • Οξύ
- Απορρυπαντικά με φθόριο • Απορρυπαντικά με αμμωνία • Απορρυπαντικά με λειαντικά • Μαλλί από χάλυβα
- Σφουγγάρι με λειαντικά • Χαλύβδινες λεπίδες • Πανί από συνθετικό (πολυεστέρα) • Πανί με χάλυβα Νήμα

Ερμάριο

1. Καθαρίστε το ντουλάπι χρησιμοποιώντας ένα μαλακό βαμβακερό ύφασμα, ελαφρά βρεγμένο με ένα αναγνωρισμένο προϊόν καθαρισμού για ιατρικό εξοπλισμό.
2. Επαναλάβετε μόνο με νερό.
3. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.

Το περίβλημα έχει δοκιμαστεί για ανθεκτικότητα στα ακόλουθα προϊόντα:

- Virex Έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό καθαριστικό • Misty Clear Lemon 10 Απολυμαντικό • Misty Multi-Purpose Purin Απολυμαντικό Καθαριστικό • Misty Multi-Purpose Purin Disinfectant Cleaner II • Zep Heavy-duty γυαλί & καθαριστικό όλων των επιφανειών • Klear Screen • Screen TFT (Kontakt Chemie) • Αφρός Incidin (Ecolab) • Microzid • Ήπιο απορρυπαντικό • Isopropyl alcohol με συγκέντρωση <5% • Οικιακή χλωρίνη (γενικό υποχλωριώδες νάτριο, διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου 5,25% αραιωμένο με νερό μεταξύ 1:10 και 1: 100) • Ακριβές καθαριστικό αφρού νοσοκομείου Απολυμαντικό

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας.

Υπηρεσία

Επικοινωνήστε με την κατάλληλη εξυπηρέτηση πελατών που αναφέρεται παρακάτω για πληροφορίες προϊόντος ή βοήθεια.

Εγγύηση

Ένα χρόνο, εξαρτήματα και εργασία.



Εκπρόσωπος της ΕΚ

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Germany

Τηλ. +49(0)6196-887170



FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Germany

Τηλ. +49(0)6104-643980



FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

United Kingdom

Τηλ. +44-(0)208-546-1047



FORESEESON KOREA

B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. +82-31-8017-0780



FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 1010, Building A

1439 Wuzhong Road

Rhein Hongjing Center, Minhang District, Shanghai, China

Tel: 18521095596



FSN™

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

Τηλ. 1-714-300-0540 Fax. 1-714-300-0546

FSN2053 4, 2021 Διορ. 7, 2026

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



www.fsnmed.com